

# sonicaid® BD3002

# HUNTLEIGH

Zwillings - Cardiotokograph (CTG) für die  
Fetalüberwachung in der Praxis oder daheim



*...performance for life*

# sonicaid BD3002


## Tragbarer Monitor mit ergonomischem Design, speziell für die Anforderungen in Arztpraxen und von Hebammen

Mit seiner kompakten Größe und seinem geringen Gewicht ist der BD3002 ideal auch für die Fetalüberwachung daheim geeignet.

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gewicht: 4,2 kg – Abmessungen: 38 x 25 x 9,3 cm

- 1 Ultraschallsonde mit je 7 Kristallen und 1.5MHz Bandbreite (2. US - Sonde optional)
- 1 Tokosonde für die Uteruskontraktion (Kalibrierung mit Offset von 20% zur besseren Übersicht)
- Automatische Erfassung / Aufzeichnung der fetalen Herzfrequenz
- Anzeige der fetalen Herzfrequenz 1 und 2 bei Zwillingschwangerschaften sowie der Uterus Kontraktion (externe Überwachung)
- Anzeige der Signalstärke/ -qualität
- Fetale Herzfrequenz: 50 – 210 Schläge pro Minute
- Automatische Erfassung der Kindsbewegungen (Actogramm)
- Kurvenbeschriftung (Annotations)
- Lautstärke der Herzfrequenz einstellbar
- Displayeinstellungen zahlreicher Funktionen (Datum/Zeit, Skalenanpassung, etc)

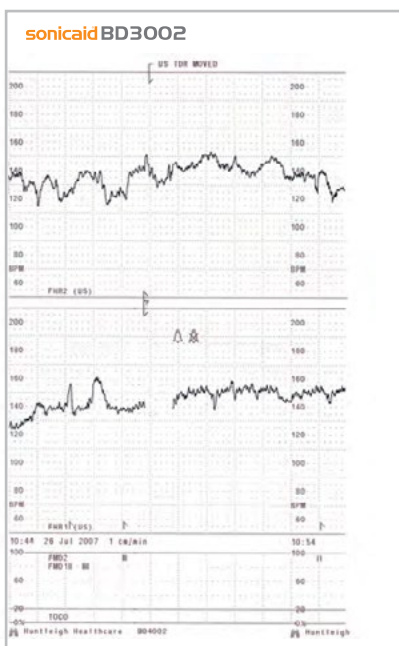

### AUSSCHLIESSLICH BEI SONICAID:

- Separate Darstellung der Kurven bei Zwillingsüberwachungen über den integrierten Drucker
  - Echtzeit Druck in hoher Auflösung auf „Blanko“ Papier
  - Variable Druckgeschwindigkeit (10,20 oder 30 mm pro Minute) und variable Höhe der Signalamplitude (20 oder 30 Schläge / Minute pro cm)
- 2 Papiergrößen erhältlich:
  - \* 15cm: Standardpapier
  - \* 21 cm: „Zweikanal“ Din A4 breites Papier zur optimalen Darstellung der Zwillingskurven

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

1 Ultraschallsonde (optional zweite US-Sonde zum Update auf die Zwillingsüberwachung), 1 Tokosonde für die Uteruskontraktion, elektronischer Ereignismarker, Gurte zur Sondenbefestigung / 150cm lang, Ultraschallgel, Registrierpapier, Bedienungsanleitung.

Seit 40 Jahren ist Sonicaid ein führender Hersteller von diagnostischen Medizinprodukten. Die Produkte im Bereich der Fetalüberwachung beinhalten: Fetaldoppler, antepartum und intrapartum Fetal Monitore, FetalCare3 CTG Archivierungssoftware für die Arztpraxis, CTG Analyse Software und das Kreißsaal Überwachungssystem sonicaid Centrale.

## HUNTLEIGH ...performance for life

Huntleigh Healthcare Ltd. - Diagnostic Products Division

35 Portmanmoor Road, Cardiff, CF24 5HN, United Kingdom

T: +44 (0)29 20485885 F: +44 (0)29 20492520 E: sales@huntleigh-diagnostics.co.uk

W: www.huntleigh-diagnostics.com



Registered No: 942245 England & Wales. Registered Office:  
ArjoHuntleigh House, Houghton Hall Business Park, Houghton Regis, Bedfordshire, LU5 5XF  
©Huntleigh Healthcare Limited 2015

AN ARJOHUNTLEIGH COMPANY

® und ™ sind Marken von Huntleigh Technology Limited. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

AW:1001005-1

### Vertrieb in Deutschland durch:

**Huntleigh Healthcare GmbH**

Industriering Ost 66

47906 Kempen

T: 02152 - 551110

F: 02152 - 551120

E: Vertrieb@Huntleigh.de

W: www.Huntleigh.de